

警告

本圖主要是提供減菌鍋基本的水電安裝配置及場所指引，以確保所供之減菌鍋能正常運作。供應商及安裝廠商應依據各國之法規要求，及其他資訊以供正確安裝之指引。未遵循上述說明本公司得以拒絕賠償及保證。

注意

本公司保留修改圖面及相關技術資料的權利。

- A. 空氣進氣管： $\phi 1/4"$ ，供給之空氣須過濾後再進入滅菌區，氣體壓力調節為6-7 bar，流量0.0083 Nm³/min，每一滅菌行程大約消耗0.005 Nm³/min，管路可安裝於牆內，但須配有可隨時取得的鑰匙。

注意：本項僅限客戶有供氣系統時提供。

1. 蒸氣產生器出水： $\phi 1/2"$ ，水溫25°C，每一滅菌行程大約消耗13公升，水壓0.5-10 bar，水硬度 ≤ 0.2 FH(0.02mmol/L)，酸鹼度pH 5-7，導電率 $\leq 15 \mu S/cm$ ，管路可安裝於牆內，但須配有可隨時取得的鑰匙。

注意：維修或清潔保養時，如將蒸氣產生器的水排放後，必須要另外加計15公升水量。

2. 排水管路 $\phi 1"$ 以上金屬管，必須抗腐蝕2"G，並且需耐100°C以上。

3. 電氣控制箱，9KW，線長4 m。(配線至滅菌鍋)

	230VAC	380VAC	415VAC	440VAC
1 ϕ 3W	22.1A			
3 ϕ 4W	22.6A	13.6A	12.5A	11.8A

注意：配線請依當地法規規定配置。

注意：三相系統有可能會有相位交錯問題需進行相位交換，請參閱說明書或維修手冊。

4. 排風機需加柵網，排風量200 Kcal/h。(載體/卸除區域)

- 4-1. 排風機需加柵網，排風量400Kcal/h。(滅菌區域)

5. 排水管(5)及儀器之(6)排氣管於管路裝配時加裝逆止閥。

B. 為維持儀器乾燥之效能及排水效能，將儀器水平調整至前後高低，其傾斜角度約為1°-2°。

重要事項：滅菌區環境條件：

-滅菌區的溫、濕度必須控制在40°C，85%RH以下

-滅菌區的環境控制，與上述第4項有直接關連，本公司建議

排風系統需由專業公司計算後配管。

注意：

- 配線至滅菌鍋的電線，必須放置於密封型配管中。
- 圖示中的排風系統僅對滅菌鍋計算熱量散逸，且必須與滅菌區的空調系統隔離。

- 滅菌鍋尺寸： $\phi 500 \times 1000 \text{mm}$ (直徑 \times 深)

- 外型尺寸：800x1700x1180mm (寬 \times 高 \times 深)

- 所有的排氣標準必須遵照當地法令之要求。

- 如果沒有天花夾層者，排風系統必須安裝於牆壁，且其排風量必須等同於有飾板的排風量，以便將空氣排出建築物，且必須加裝柵網。

- 本圖所標示的安裝及配管，概由買方負責。




- 假如如安裝過程採用非本圖標示的接頭而遭遇到問題時，請與本公司連繫以便取得技術諮詢服務。

- 本圖標示的尺寸蓋以計算至牆的表面為之。

- 維修保養區必須有充足的照明亮度。

註：本零件及其用料均須符合RoHS指令。

MARK	REVISION RECORD	變更內容	DATE	日期	DRAWN	修改
A	依竣工圖變更	NA21102修改	2021-12-20		Denny	

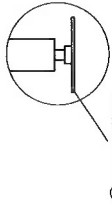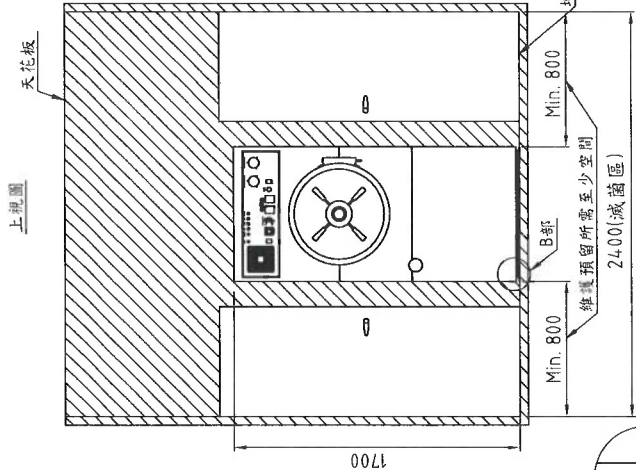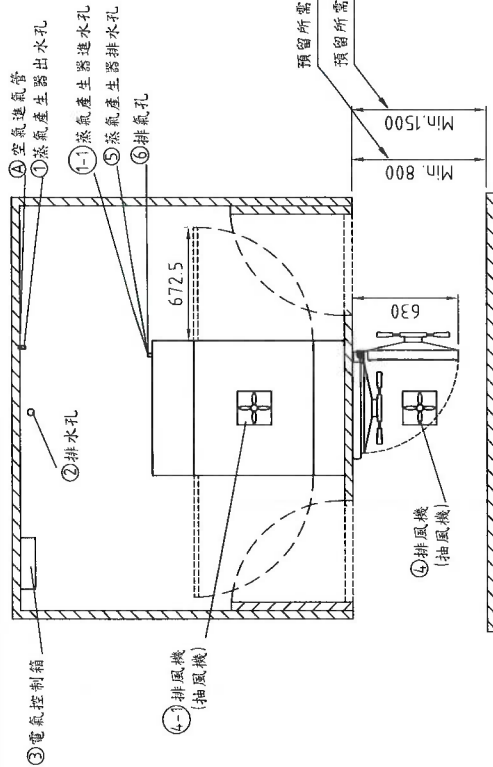

⑧ 水平調整腳

STURDY 新駿實業股份有限公司 STURDY INDUSTRIAL CO., LTD.			
TOLERANCE	未標註者一般公差表	DESIGNED	設計
0~10 ±0.2	51~100±0.6	201~500±1	ANGLE ±1°
11~50 ±0.4	101~200±0.8	501~X ±2	VIEWPOINT 視角
		SCALE 比例	1:45
		UNIT 單位	mm
		NAME 圖名	SAP-500 安裝規畫圖
		DATE	2021/12/20
		DESIGNED	Joe
		DRAWN	Denny
		CHECKED	校核
		APPROVED	核准
		DATE	2022/01/19
		MODEL NO.	SAP-500
		代表機種	SAP-500