## ①警告

本圖主要是提供滅菌鍋基本的水電安裝配置及場所指引, 以確保所提供之滅菌鍋能正常運作。供應商及安裝廠商應依據 各國之法規要求,及其他賣訊以供正確安裝之指引。 未遵循上述說明本公司得以拒絕賠償及保證。

## ⚠注意

本公司保留修改圖面及相關技術資料的權力。

A. 空氣進氣管: § 1/4",供給之進氣體須過濾後再進入滅菌區,氣體壓力調節為6~7 bar,流量0.0083 Nm³/min,每一減菌行程大約消耗0.005 Nm³/min,管路可安置於牆內,但須配有可隨時取得的鑰匙。

注意:本項僅限客戶有供氣系統時提供。

- 1. 冷水管路接頭(真空泵供水): § 1/2" , 水溫25°C , 每一行程總耗水量約10-300公升(耗水量依乾燥行程時間而定)真空泵每分鐘耗水量約10公升、水壓0,5-10 bar、水硬度0.9°fH(0.09mmo1/L)、pH 7-9、水含氟量  $\leq 0.1$  mg/1,管路可安置於牆內,但須配有可隨時取得的輸匙。
- 2. 蒸煮產生器出水: §1/2" , 水溫25°C , 每一滅菌行程大約消耗>45公升 , 水壓0.5~10 bar , 水硬度 ≤0.2" fH(0.02mmo1/L) , 酸鹼質pH 5-7 , 導電率 ≤15 μ S/cm管路可安置於牆內 , 但須配有可隨時取得的鑰匙。

注意:维修或清潔保養時,如將蒸汽產生器的水排放後,必須要 另外加計15公升水量。

- 3. 排水管路 \$ 1"以上金屬管,必須抗腐蝕2"G,並且需耐100°C以上。
- 4. 電氣控制箱, 15kWx2, 線長4 m。(配線至滅菌鍋)

3~ AC220V AC230V AC380V AC400V AC415V AC440V Current(A) 134A 128.2A 77.6A 73.7A 71A 67A

注意:配線請依當地法規規定配置。

- 注意:三相系統有可能會有相位交錯問題需進行相位交換,請參閱說明書 或維修手册。
- 5. 排風機需加柵網,排風量200 Kcal/h。(載體區域)
- 5-1. 排風機需加柵網,排風量400 Kcal/h。(滅菌區域)
- 5-2. 排風機需加柵網,排風量200 Kcal/h。(卸載區域)

注意:(卸載區域)空調須獨立安裝,不得與其他區相通。


- 6. 蒸氣產生器排水管(6)及儀器之(7)排氣管於管路裝配時加裝逆止閥。
- B. 為維持儀器乾燥之效能及排水效能,將儀器水平調整至前低後高,其傾斜角度約略為1°~2°。

## 重要事項:滅菌區環境條件:

- -滅菌區的温、濕度必須控制在40°C,85%RH以下
- -滅菌區的環境控制,與上述第5~5-2項有直接關連,本公司建議 排風系統需由專業公司計算後配管。

## 注意:

- 配線至滅菌鍋的電線,必須放置於密封型配管中。
- 圖示中的排風系統僅對本滅菌鍋計算熱量散逸,且必須與滅菌 區的空調系統隔離。
- 滅菌鍋尺寸:610x915x1200mm (寬x高x深)
- 外型尺寸:1740x2070x2130mm(寬x高x深)
- 所有的排放標準必須遵照當地法令之要求。
- 如果沒有天花夾層者,排風系統就必須安裝於牆壁,且其排風量必須等同於有飾板的排風量,以便將空氣排出建築物,且必須加裝柵網。
- 本圖所標示的安裝及配管,概由買方負擔。
- 假如安裝過程採用非本圖標示的接頭而遭遇問題時,請與本公司聯繫以便取得技術諮詢服務。
- 本圖標示的尺寸蓋以計算至牆的表面為之。
- 維修保養區必須要有充足的照明亮度。

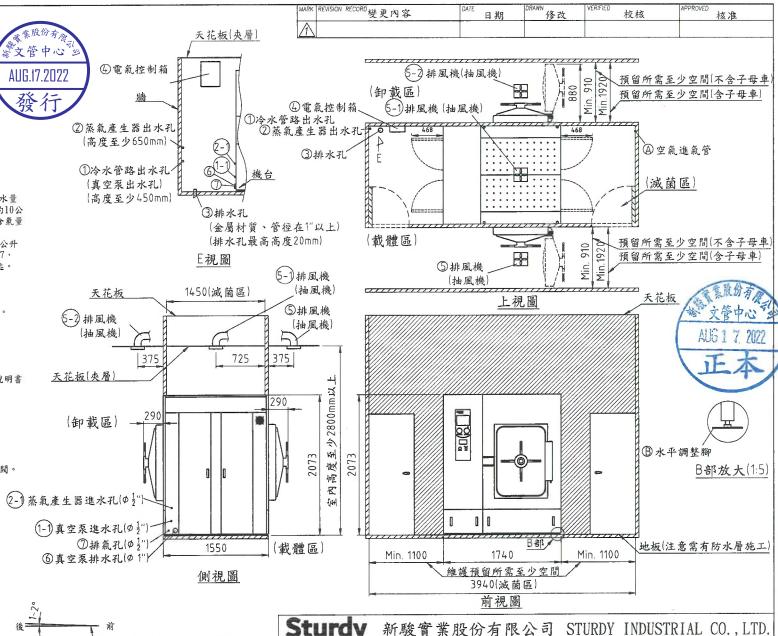



註:本零件及其用料均須符合RoHS指令。

表標註者一般公差表 未標示之圓角為R1導角為C1 設計: 繪圖: 校核: 核准: 201~500±1 ANGLE ±1 Joe Mia 0~10 ±0.2 51~100±0.6 11~50 ±0.4 |101~200±0.8 |501~X ±2 >0>20701-0228,10 MATERIAL 村 質 SURFACE FINISHING SCALE 1:56 圖 名 SAT-S0848HPD 安裝規書圖 單位 mm 代表機種 SAT-S0848HPD 器 SAT-S0848HPD-H-001-01 表面處理