

1.冷水管路接頭(真空泵供水): Ø1/2",水溫25°C,每一行程總耗水量約

、水壓0.5~10 bar、水硬度0.9°fH(0.09mmol/L)、pH 7~9、水含氣量 ≤0.1 mg/l,管路可安置於牆內,但須配有可隨時取得的鑰匙

介 2.蒸氣產生器出水: Ø1/2",水溫25°C,每一滅菌行程大約消耗13公升

- ,水壓0.5~10 bar,水硬度≤0.2°fH(0.02mmol/L),酸鹼質pH 5~7
- ,導電率≦15μS/cm管路可安置於牆內,但須配有可隨時取得的鑰匙。
- 注意:維修或清潔保養時,如將蒸汽產生器的水排放後,必須要 另外加計15公升水量。
- 3排水管路♥1"以上金屬管,必須抗腐蝕2"G,並且需耐100°C以上。
- 4.電氣控制箱,12kW,線長4 m。(配線至滅菌鍋)

230VAC 380VAC 415VAC 440VAC $3 \phi 4 \% 34.35 A 20.72 A 19.07 A 18.07 A$

注意:配線請依當地法規規定配置。

- 注意:三相系統有可能會有相位交錯問題需進行相位交換,請參閱說明書 /3 或維修手冊·
- 5. 排風機需加柵網,排風量200 Kcal/h。(載體/卸除區域)
- 5-1.排風機需加柵網,排風量400Kcal/h。(滅菌區域)
- 6.真空泵排水管(6)及儀器之[7]排氣管於管路裝配時加裝逆止閥。
- B.為維持儀器乾燥之效能及排水效能,將儀器水平調整至前低後 高,其傾斜角度約略為1°-2°。

重要事項:滅菌區環境條件:


- -滅菌區的溫、濕度必須控制在40°C,85%RH以下
- -滅菌區的環境控制,與上述第5項有直接關連,本公司建議排風 系統需由專業公司計算後配管。

注意:

- 配線至滅菌鍋的電線,必須放置於密封型配管中。
- 圖示中的排風系統僅對本滅菌鍋計算熱量散逸,且必須與滅菌 區的空調系統隔離。
- 滅菌鍋尺寸:510×510×1000mm (寬x高x深)
- 外型尺寸: 980×1793×1280mm (寬x高x深)
- 所有的排放標準必須遵照當地法令之要求。
- 如果沒有天花夾層者,排風系統就必須安裝於牆壁,且其排風 量必須等同於有飾板的排風量,以便將空氣排出建築物,且必
- 本圖所標示的安裝及配管, 概由買方負擔。
- 假如安裝過程採用非本圖標示的接頭而遭遇問題時,請與本公司 連繫以便取得技術諮詢服務。
- 本圖標示的尺寸蓋以計算至牆的表面為之。
- 維修保養區必須有充足的照明亮度。



註:本零件及其用料均須符合RoHS指令。

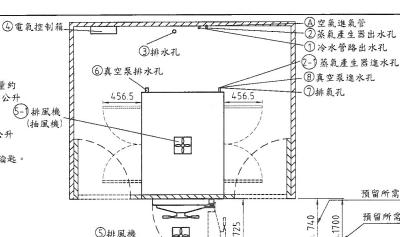

Ξ.

/!\ 警告

本圖主要是提供滅菌鍋基本的水電安裝配置及場所指引, 以確保所提供之滅菌鍋能正常運作。供應商及安裝廠商應依據 各國之法規要求,及其他資訊以供正確安裝之指引。 未遵循上述說明本公司得以拒絕賠償及保證。

/!\注意

本公司保留修改圖面及相關技術資料的權力。

A. 空氣進氣管: Ø1/4",供給之進氣體須過濾後再進入滅菌區 ,氣體壓力調節為6~7 bar, 流量0.0083 Nm3/min, 每一滅菌行程 大約消耗0,005 Nm3/min,管路可安置於牆內,但須配有可隨


FEB 0 9 7077

注意:本項僅限客戶有供氣系統時提供。

時取得的鑰匙。

預留所需至少空間(不含子母車) 預留所需至少空間(含子母車)

2030(滅 萧區)

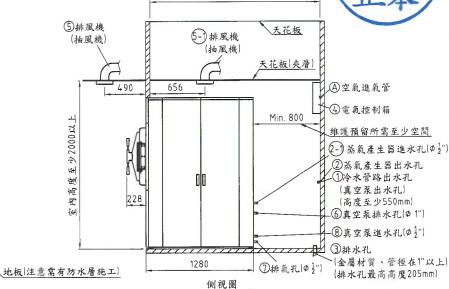

前視圖


980

維護預留所需至少空間

2580(滅菌區

Min. 800

上視圖

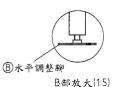

Min. 800

(抽風機)

STIRDY 新駿實業股份有限公司 STURDY INDUSTRIAL CO., LTD.

0.0.5						
TOLERANCE未標註者一般公差表	F未標註者一般公差表 未標示之圓角為R1導角為C1		DESIGNED 設計:	DRAWN 繪圖:	VERIFIED 校核:	APPROVED 核准
0~10 ±0.2 51~100±0.6	201~500±1	ANGLE ±1°	Joe	Denny	文製里	東駅里
11~50 ±0.4 101~200±0.8	501~X ±2	VIEWPOINT 視角 ⊕ □	20120713	20211221	2020119	70220119
MATERAL NAME A SAT-S0260W 安裝規畫圖 RAT-S0260W 安裝規畫圖					圖	
SURFACE FINISHING MODEL NO. 代表機種 SAT-SO260W MC.NO. SAT-SO260W-H-001-04					4	

為維持儀器乾燥之效能及排水效能

後,將儀器水平調整至前低後高,其

傾斜角度約略為1°~2°